

# Fotlåda till HD Balance

## Bruksanvisning / Monteringsanvisning

Sida 1 (1)

### Ingående delar:

1 x



### Montering på rullstol

Byte/montering av fotlåda görs så här:

①

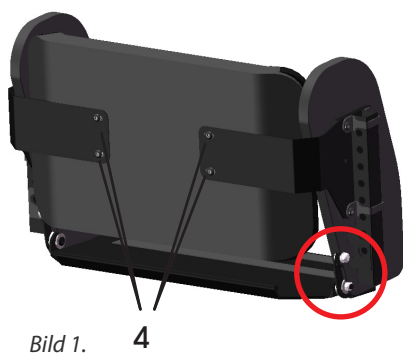


Bild 1.

Vinkelställbar knäled

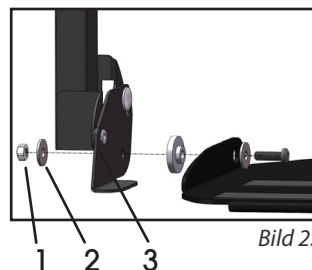


Bild 2.

Vinkelfast knäled

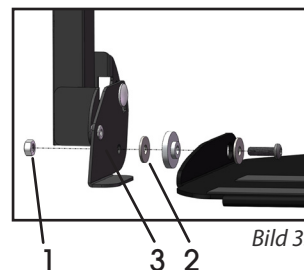


Bild 3.

1. Vid leverans är fotlådan förberedd för att sitta på en vinkelställbar knäled. Om den ska sitta på en vinkelfast (90 eller 105 grader) krävs en liten justering innan montering. Gör så här (Se bild 1-3):

- Lossa muttern (1) helt och trä av brickan (2) samt fotplattshållaren (3) från skruven.
- Placera brickan (2) mellan fotplattshållaren och fotplattan istället och dra åt muttern igen.

2. Se till att skruvarna som håller vadplattan (4) inte är åtdragna helt och trä därefter på fotlådan på rullstolens benstödsrör (Bild 4). När fotlådan är på plats dras skruvarna (4) åt.

3. Ställ fotlådan i önskat höjdläge.

4. Färdigt!



Bild 4.

### Om fotlådan går trögt

- Plåtarna som håller vadplattan kan vara lite skeva vilket gör rören tröga att skjuta upp och ner.

Fixa detta genom att demontera vadplattan (lossa skruvarna, 4) och bänd lite i plåtarna så de hamnar på samma höjd och djup. Gör gärna detta när fotlådan sitter på stolen!

### Användning och skötselråd

Fotlådan kan rengöras genom avtorkning med tvål och vatten. Den kan även desinficeras med handdesinfektion. För övrig information se Underhållsanvisning, art nr 95730.

# Footbox for HD Balance

## User manual / Assembly instructions

Page 1 (1)

Parts included:



## Mounting on the wheelchair

To shift/mount the footbox on a HD Balance:

①



Image1. 4

Angle adjustable legrest

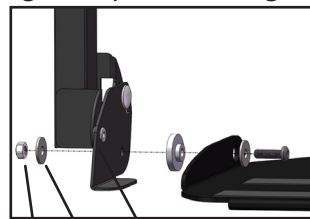


Image 2.

Fixed angle legrest

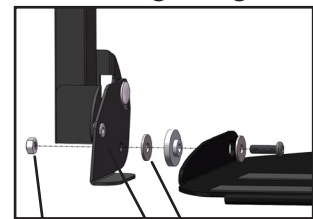


Image 3.

1. On delivery the footbox is prepared for an angle adjustable legrest. If it shall be mounted on a fixed angle legrest (90 or 105 degrees), a small adjustment is required:

- Release the nut (1) completely and dismount the washer (2) and the footplate holder (3) from the screw.
- Place the washer (2) between the footplate holder and the footplate instead and replace the nut again.

2. Release the screws for the calf support (4) and mount the footbox on the wheelchair as shown in image 4. Tighten the screws (4) when the footbox is in place.

3. Adjust the footbox to correct height.

4. Finished!



Image 4.

### If the footbox is hard to adjust (height)

- The plates that holds the calf support might be skew, this makes it hard to move the footbox.

To fix it: Remove the calf support (remove screws, 4) and bend the plates until they are in the same height and depth. It is recommended to do this while the footbox is mounted on the wheelchair!

## Use and Care instructions

The footbox can be cleaned by wiping with soap and water. It can also be disinfected with hand sanitizer. For further information, see the Maintenance Instructions, art. no. 95730-1.