

Ryggdistanser, HD Balance

Bruksanvisning / Monteringsanvisning

Sida 1 (1)

Avsedd användning

Ryggdistanser används för att åstadkomma ett kortare sittdjup än vad som annars är möjligt. Vid användning av HD Balance ryggdistanser blir sittdjupet 2,5 cm kortare. Användandet medför risker, se nedan, och är därför märkt med varningsetikett:




- Användning av ryggdistanser påverkar rullstolens balansering och ska bara användas i undantagsfall. Rullstolens tyngpunkt flyttas och gör den mer tippbenägen framåt.
- Ryggdistanser ska bara användas till brukare som **verkligen** behöver det korta sittdjupet.
- Brukare med ett beteende som riskerar att tippa stolen framåt kan kombinera ryggdistanser med att flytta bak sitsenheten. Se vidare i infoblad 95942.

Ingående delar:



Montering

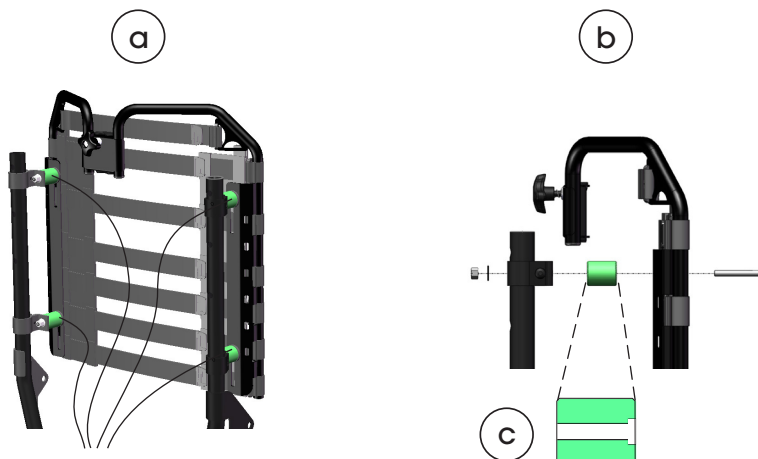

1. Demontera ryggsystemet från ryggklamrarna.
2. Montera de 4 ryggdistanserna mellan ryggklamrer och ryggsystem med de medföljande bultarna, brickorna och muttrarna enligt (a) och (b). **Viktigt** att ryggdistansen vänds så att hålförsänkningen i ena änden pekar framåt (c).
3. Klart!

Användning och skötselråd

Kan rengöras genom avtorkning med tvål och vatten. För övrig information se Underhållsanvisning, art nr 95730.

Back spacers, HD Balance

User manual / Assembly instructions

Page 1 (1)

Intended use


Back spacers are used to achieve a shorter seat depth than otherwise possible. When using HD Balance back spacers the seat depth is decreased with 2,5 cm. The use implies risks, see below, and the back spacers are marked with warning labels:




- The use of back spacers impact wheelchair balancing and should only be used in exceptional cases. The center of gravity moves and makes it more prone to tipping forward.
- Back Spacers should be used only for patients who really need the short seat depth.
- Patients with a behavior that might tip the wheelchair forward can combine the back spacers with a backward positioned seat unit. See info sheet 95942-1 for more info.

Parts included:

4 x

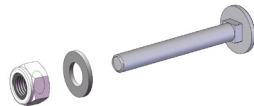

Assembling

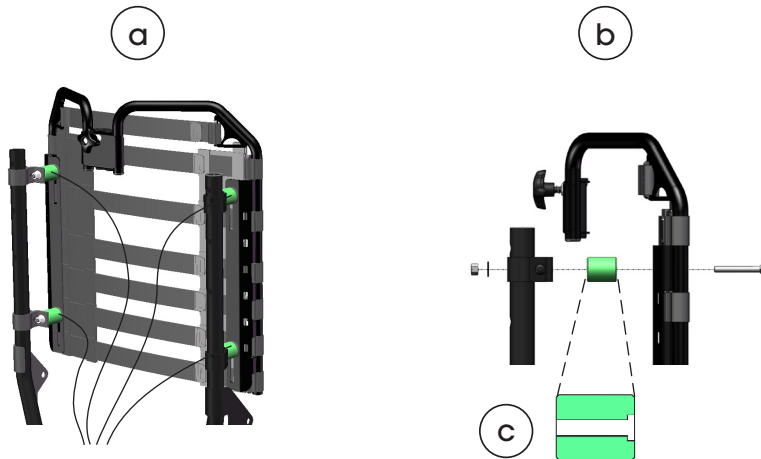

1. Remove the back system from the brackets.
2. Mount the 4 spacers between the brackets and the back system with the supplied bolts, washers and nuts according to (a) and (b). It is **important** that the countersink points forward (c).
3. Finished!

Use and care instructions

Can be cleaned by wiping with soap and water. For further information, see the Maintenance Instructions, art. no. 95730-1.