



Vid behov av syrgasbehandling finns möjlighet att montera syrgashållare på HD Balance.

Syrgashållaren finns i två olika modeller. Den mindre modellen passar 1 l syrgastuber (A), den större modellen passar 2 - 2,5 l syrgastuber (B). Syrgastuber som används i dessa syrgashållare bör vara av typen LIV från AGA AB eller likvärdig.

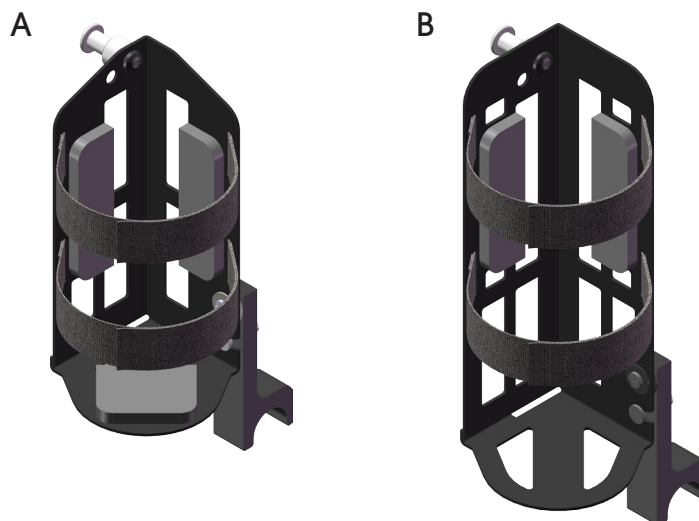

Fäste till syrgashållare

Syrgashållaren sätts på plats i fästet (C) som monteras på rullstolens ryggram. Syrgastuben kan därefter enkelt och säkert spännas fast i syrgashållaren med hjälp av kardborrband.

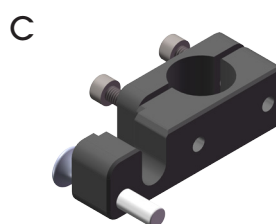

Användning

Syrgashållaren med tub kan enkelt lossas från fästet på rullstolen och följa med brukaren vid en förflyttning. Hållarens fot kan vridas upp, vilket gör det möjligt att tillfälligt ställa ifrån sig hållaren på golvet.

Mått

Tabell 1 - Mått - syrgashållare

Modell	Höjd, hållaren [cm]	Max diameter, flaskan [cm]
Liten	21	12
Stor	26	12

Tänk på

- Syrgastuber ska hanteras med varsamhet och aktas för stötar
- Om syrgashållare med tub tillfälligt ställs på golvet, beakta tipprisken
- Syrgastuber ska ej placeras liggande men kan lutats så mycket som rullstolens tilt/ryggfällning i standardkonfiguration tillåter
- Om syrgashållare monteras på rullstol medför detta en förhöjd tipprisk, speciellt i sitstiltat/ryggfällt läge
- Använd tippskydd


Artikelnummer

Artikelnummer för syrgashållare och fäste finns i Beställningsguiden, art.nr. 95750.

Oxygen tank holder for HD Balance


When supplemental oxygen is needed HD Balance can be equipped with an oxygen tank holder.

Oxygen tank holders are available in two models. The smaller model (A) is suited for 1 L oxygen tanks and the larger model (B) is suited to oxygen tanks of 2 to 2,5 L. The oxygen tanks used should be of the type LIV from AGA AB, or equivalent.

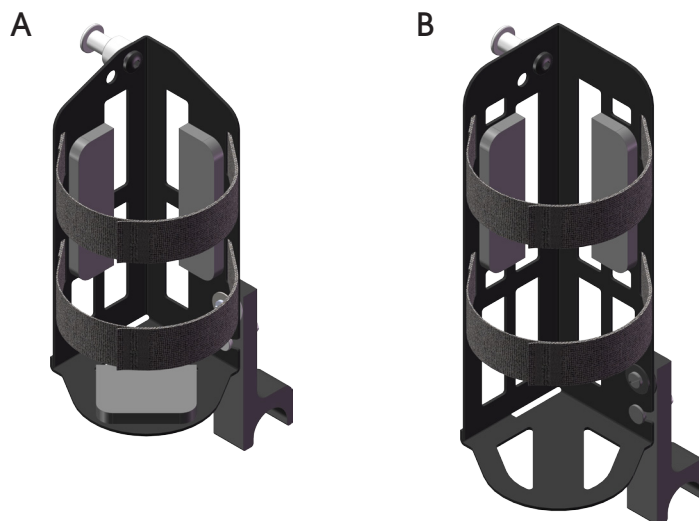

Mount for oxygen tank holder

The oxygen tank holder is held in place via a mount (C) which is attached to the back frame of the wheelchair. The oxygen tank is then safely and easily secured in the holder with two velcro straps.

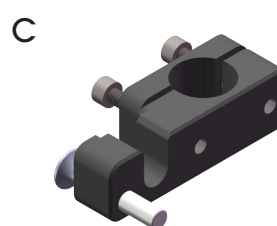

In use

The oxygen tank holder with tank can easily be removed from the wheelchair to remain with the user when transferring out. The foot of the holder rotates up, so that the holder can stand on a flat surface.

Measurements

Table 1 - Measurements - Oxygen tank holder

Model	Height, holder [cm]	Max diameter, tank [cm]
Small	21	12
Large	26	12

Keep in mind

- Oxygen tanks must be handled with care and protected from shocks
- If the oxygen tank holder and tank are ever placed on the floor be aware of the risk for tipping
- Oxygen tanks should never lay flat but can be angled as far as the wheelchair allows in standard configuration (seat tilt plus back recline)
- Using an oxygen tank holder with tank increases the risk of tipping for the wheelchair, particularly when the seat is tilted and the back reclined
- Use anti-tip devices

Article numbers

Article numbers for the oxygen tank holders and mount are found in the Prescription form, art.no. 95750-1.