


Hemiplegiarmstöd

Bruksanvisning / Monteringsanvisning

Sida 1 (1)

Ingående delar:

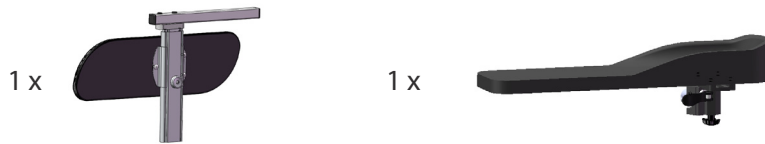

Montering / Justering

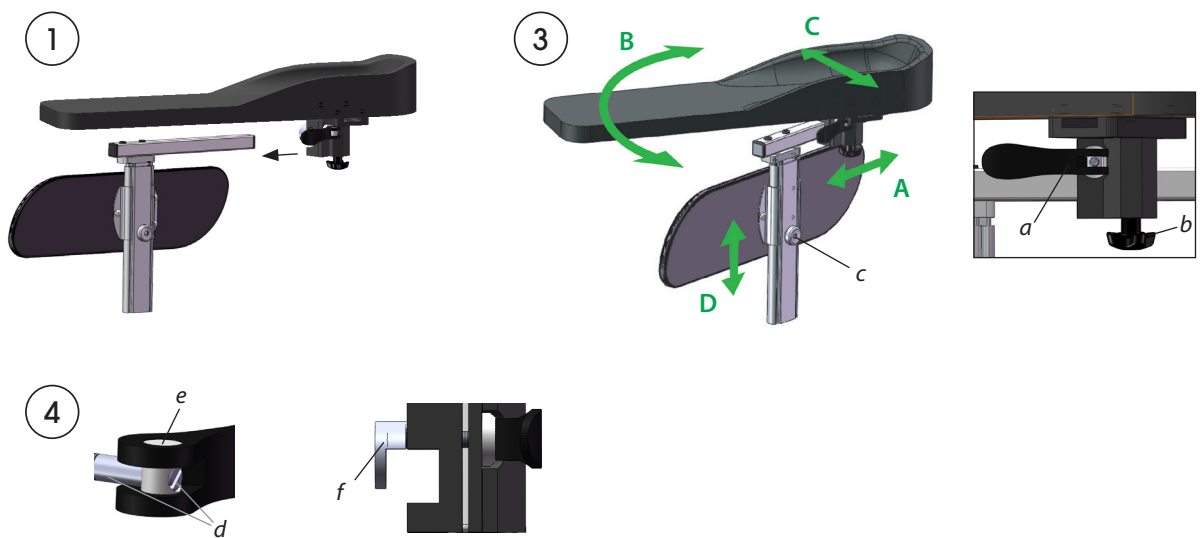


Bild 4b

Montering

1. Öppna låsspaken (a) och trä på armstödsenheten på ställröret, lås därefter med spaken.
2. Montera armstödet i armstödsfästet på en HD Balance rullstol. Observera att armstödet finns i höger- resp. vänsterutförande.
3. Ställ in önskat läge i djup (A) och vinkel (B) med hjälp av låsspaken (a) samt i sidled (C) genom att lossa rattan (b) och därefter skjuta armstödet i sidled. Höjden (D) ställs in med knappen på stolpen (c). Lås spak och ratt när du är nöjd. Om låskraften är för svag, justera enligt nedan.

Justering av låskraft för klämspaken (a):

4. Öppna låsspaken så mycket som möjligt så att du fortfarande kommer åt justerskruven (d). Dra åt skruven (d) tills dess att önskad låskraft uppnås. (Detta kan göras när armstödet sitter på rullstolen.)

Om det behövs mer spännkraft än skruven kan åstadkomma kan armstödet behöva tas bort från stolpen och skruven (d) justeras i hylsan (e). Även brickan (f) måste justeras till läget i bild 4b innan armstödet träns på stolpen.

Användning och skötselråd

Armstödet kan rengöras genom avtorkning med tvål och vatten. För övrig information se Underhållsanvisning, art nr 95730.




- Det föreligger viss klämrisk mellan armstödet rörliga delar. Var särskilt uppmärksam på brukarens armar och händer vid injustering av armstödet position!
- Armstödet skall ej belastas och användas som stöd vid förflyttning i och ur rullstolen.

Armrest, Hemiplegia

User manual / Assembly instructions

Page 1 (1)

Parts included:

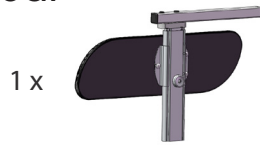

Assembling

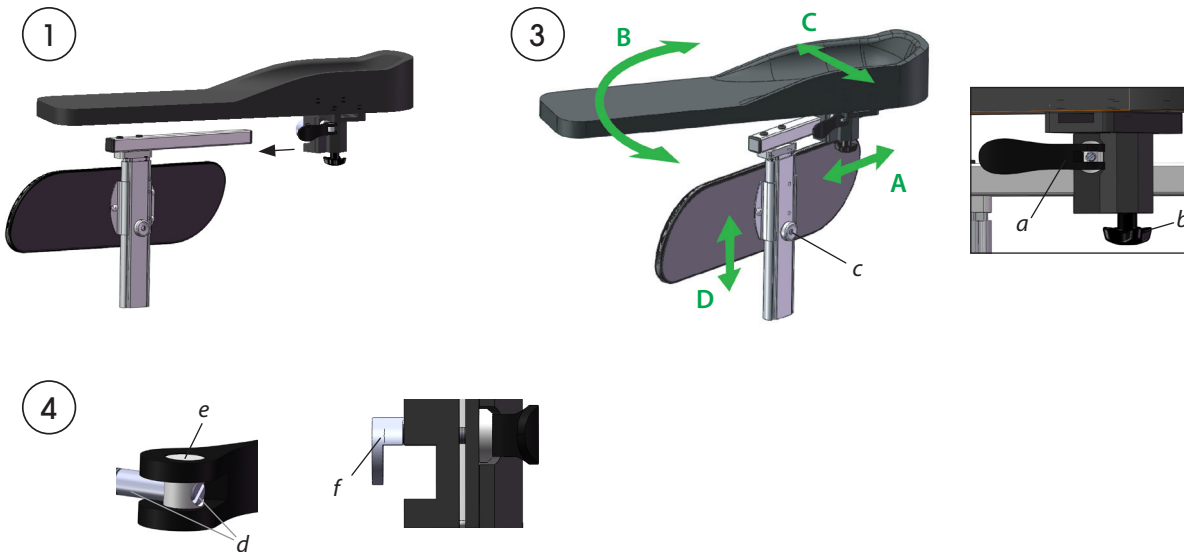


Figure 4b

Mount:

1. Open the clamp (a) and mount the armrest on the stand. Lock the clamp.
2. Mount the armrest and stand in the armrest bracket on a HD Balance wheelchair. Note that the armrest is available in both right - and left hand side versions.
3. Adjust to the desired position; Use the clamp (a) for depth (A) and angle (B). Sideways adjustment is controlled by the knob (b) and the height (D) is adjusted with the push-button (c). Lock all controls when ready. If the clamp-force is insufficient, adjust according to the instructions below.

Adjustment of the force in the clamp (a):

4. Open the clamp as much as possible so that you still can reach the set screw (d). Tighten the screw until you achieve the desired clamp-force. (Can be done with the armrest still on the wheelchair.)

If even more clamp-force is needed it is necessary to remove the armrest from the stand. Then adjust the set screw (d) in the sleeve (e). Also adjust the clamp piece (f) to the position in figure 4b before you put the armrest back on the stand.

Use and Care instructions

The armrest can be cleaned by wiping with soap and water. For further information, see the Maintenance Instructions, art. no. 95730-1.



- There is some risk of pinching between the moving parts of the armrest. Pay particular attention to the patient's arms and hands when adjusting the armrest position!
- The armrest must not be subject to loads or strain and must not be used as support when the user transfers to or from the wheelchair.