



► Kortfattad bruksanvisning *Svenska*

Denna bruksanvisning är ett komplement till den fullständiga bruksanvisningen.

Läs alltid den fullständiga versionen innan rullstolen tas i bruk.



ALLMÄNNA SÄKERHETSASPEKTER

- **Följ underhållsanvisningarna.**
Håll rullstolen ren och testa reglage och bromsar med jämna mellanrum.
- Upptäcks en skada eller avsaknad av en detalj ska rullstolen tas ur bruk tills detta är åtgärdat.
- Använd **bara** godkända tillbehör.
- Rullstolen bör framföras och användas med omdöme för att undvika onödiga risksituationer.
- Rullstolen är inte avsedd att framföras av andra barn.
- Var observant på tipprisken bakåt, den ökar om väskor eller liknande hängs på ryggstödet.
- Var uppmärksam på brukarens situation i rullstolen. Viss klämrisk finns p.g.a de olika inställningsmöjligheterna.

- Tänk på att brukaren inte alltid kan tala om att klämsituation uppstått.
- Brukare som är väldigt aktiva eller har ofrivilliga rörelsemönster kan tippa rullstolen om de greppar tag i fasta föremål (t.ex. dörrkarmar). Ha god uppsikt över dessa brukare.
- Vissa klädesplagg är ej lämpliga på brukaren då dessa kan fastna i hjulen. Var speciellt försiktig med halsdukar och liknande då dessa kan dras åt runt brukarens hals om de fastnar.
- Fäst ryggdynans kardborrband runt ryggsystemet för att hålla dynan på plats och undvika risk för tryck.
- Vid lyft: Läs instruktionen för lyfthjälpmidlet noga och var uppmärksam på brukarens armar och ben under lyftet.

TIPPSKYDD

Tippskydden kan ställas i tre olika lägen med hjälp av ett snäpplås.

För att vinkla upp tipskydden:


1. Tryck på tipskyddens sparkpropp med hand eller fot.
2. Tippskydden lossar och vrids något inåt.
3. Vrid upp tipskydden till inaktivt läge.




Se alltid till att återställa tipskydden och kontrollera att dessa når det låsta läget.

BROMSAR

Vårdarbroms (1) och brukarbroms (2) regleras enligt figuren.

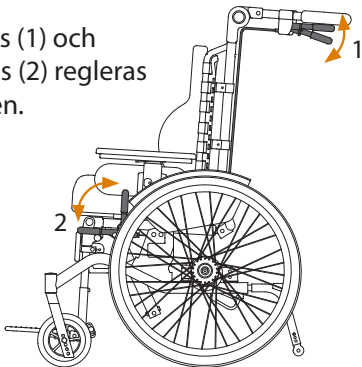

Parkeringsbroms aktiveras genom att trycka upp bromshandtagen mot körbygeln (1), för sedan låshylsan framåt (2).

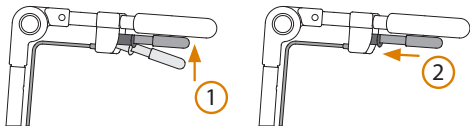

Använd alltid höger- och vänster parkeringsbroms tillsammans.

KÖRBYGEL

Körbygeln kan justeras både uppåt och neråt.

- Tryck på knapparna på både höger och vänster sida, för körbygeln till önskad position.
- Släpp knapparna och se till att körbygeln klickar i önskat läge.
- Kontrollera att vajrarna löper fritt och inte utsätts för åverkan vid denna rörelse. Vajrarna ska ligga utmed ryggrören.




ARMSTÖD

Armstöden sticks ner i de avsedda fästena på varje sida.




Höjdställning

Trycka in knappen enligt pilen. Håll den intryckt och ställ in önskad höjd. Armstödsstolpen har markeringar med 1 cm mellanrum.

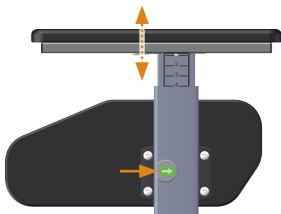

Djupinställning


Tryck in låskläppen och ställ i önskat läge.

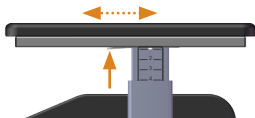

BENSTÖD HELT

Vinkling

Dra i knoppen
(1) och för
benstödet
till önskat läge.

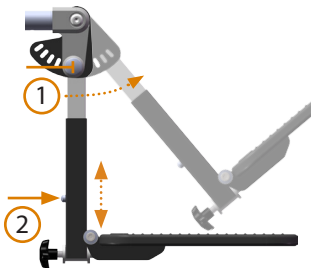


Höjdinställning

Tryck in
snäppknappen
(2) och flytta till
önskat läge.

Uppvinkling fotplatta


Vik upp
fotplattan mot
benstödsrören.

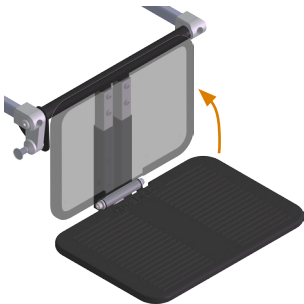

BENSTÖD DELAT

Vinkling

Dra i knoppen (1) och för benstödet till önskat läge.

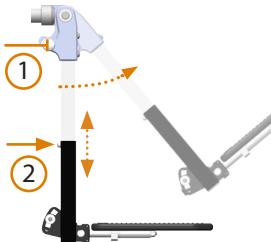

Höjdinställning

Tryck in snäppknappen (2) och flytta till önskat läge.




Uppvinkling fotplatta

Tryck på fotplattan.

Borttagning


Tryck på låsknappen (3) och dra bort benstödet.

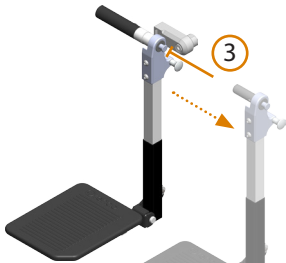

SITSTILTNING & RYGGVINKLING

Sitstiltningen styrs med det **gröna** reglaget på höger sida av körbygeln.

Ryggvinklingen styrs med det **grå** reglaget på vänster sida av körbygeln.

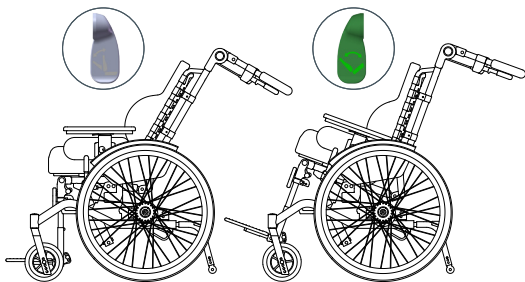

Reglagen ska alltid användas ett i taget, aldrig samtidigt.

HJUL

Ta loss hjul

Tryck in låsknappen på hjulets nav, lyft rullstol en aning och ta loss hjulet.

Montera hjulen

För in hjulaxeln i hylsan. Tryck in låsknappen och tryck samtidigt in hjulet så de 3 tapparna på hjulnavet passar in i bromsskivans hål. Slapp låsknappen.





Kontrollera att hjulet sitter fast.

TRANSPORT I FORDON

- Transportera med rullstolen i färdriktningen.
- Använd 4-punkts bandsystem för rullstolen och 3-punkts säkerhetsbälte för brukaren.
- Huvudstöd ska användas.
- Ta av alla tillbehör: bord, bålstöd mm.
- **OBS:** Spänn inte fast stolen för hårt.

Främre
fästpunkt
runt
tvärröret

Bakre
fästpunkt
genom
öglan

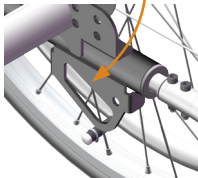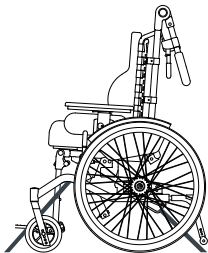


IHOPFÄLLNING AV RULLSTOLEN

- Ta av alla tillbehör, armstöd och dynor. Tilta fram sitsen.
- Håll i körbygeln och dra ut ryggfällningssprinten (1). Gasfjädern lossnar och ryggstödet kan fällas framåt.

ÅTERSTÄLLNING EFTER IHOPFÄLLNING

- Fäll upp ryggstödet och dra ut sprinten (1).
- Passa in sprinten genom gasfjädersnål och helt genom fästets båda plåtar (2).

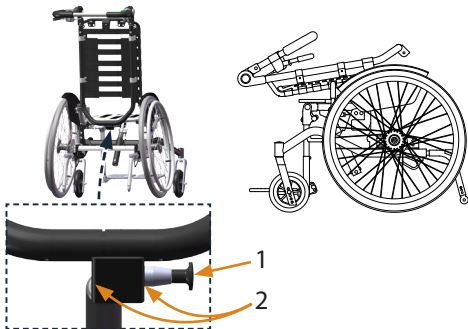

CHECKLISTA EFTER TRANSPORT

- Kontrollera att ryggfällningssprinten (1) går helt igenom fästet (2).
- Kontrollera att hjulen sitter fast ordentligt.
- Kontrollera att tippskyddet är i rätt läge.
- Testa de viktigaste funktionerna; broms, ryggvinkling och sitstilt.



Om sprinten inte är korrekt monterad kan fästet brytas sönder och brukaren tippas hastigt bakåt.



HD Rehab AB
Tryffelsslingan 4
181 57 Lidingö
SWEDEN



+46 (0)8 767 04 80

info@hdrehab.se



www.hdrehab.se



Dok. nr. 96710
Kortfattad Bruksanvisning
HD Motion
Rev A 2020-09-18



Läs den kompletta bruksanvisningen
(dok. nr. 96701) för mer information.

DAGLIG FUNKTIONSKONTROLL

För att säkerställa brukarens säkerhet bör en daglig funktionskontroll av de mest vitala delarna genomföras enligt nedan.

- Testa färdbroms.
- Testa brukarbroms.
- Kontrollera att sitstilt och ryggfällning fungerar.
- Kontrollera att hjul sitter fast och är hela och rena.
- Kontrollera att dynor sitter där de ska och är hela och rena.
- Kontrollera att tippskyddet sitter i lämpligt läge.