


Avsedd användning

Syrgashållare är avsedd att användas på HD Motion rullstolar. Den passar 2 - 2,5 l syrgastuber. Syrgastuber som används bör vara av typen LIV från AGA eller likvärdig.

Ingående delar




1 x klammer

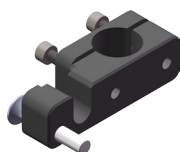

1 x hylla




Montering

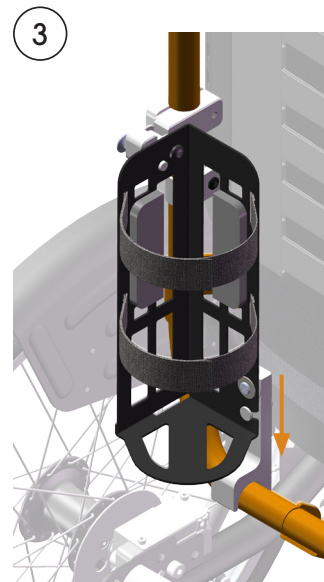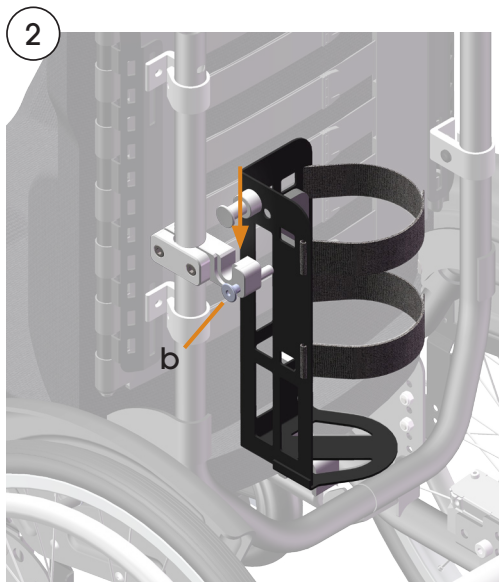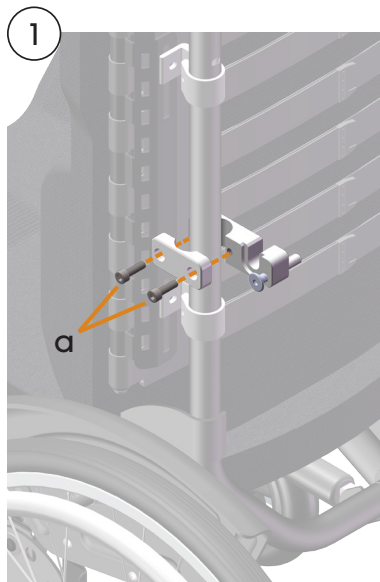


OBS: Syrgasflaskan ska ej vara i hållaren vid montering

- ① Montera syrgashållarens fäste runt ryggramens vänstra rör. Fäst med skruvarna (a) men vänta med att dra åt dessa.
- ② Dra ut sprinten (b) och placera hållaren i fästet, släpp sedan sprinten.
- ③ Skjut hållare och fäste nedåt tills hållaren vilar på ryggramens horisontella rör. Skruva åt skruvarna (a).

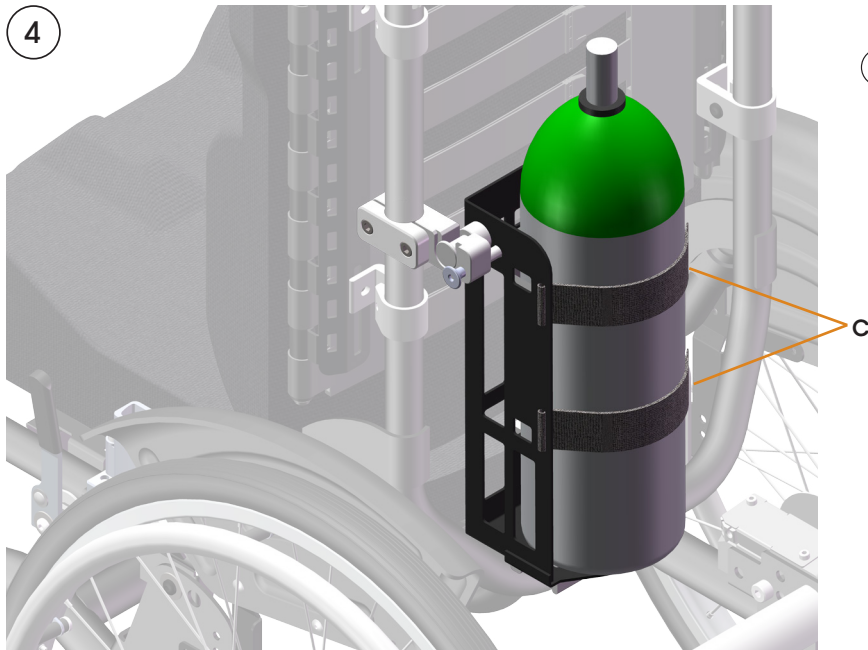

- ④ Placera syrgasflaskan i syrgashållaren och fäst denna med de två kardborrbanden (c). Se till att banden dras åt ordentligt så att syrgasflaskan sitter stadigt i syrgashållaren.

Om syrgashållaren med flaska ska ställas på golvet, tryck in muttern (d) och vrid upp foten 90°. Innan hållaren placeras på rullstolen ska foten vridas ner till lodrätt läge igen.

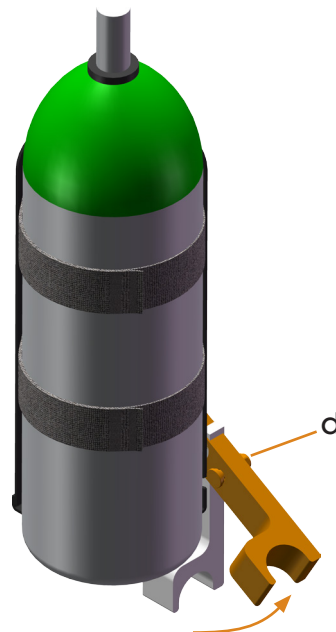

Användning och skötselråd

Syrgashållaren kan rengöras genom avtorkning med mildt rengöringsmedel och vatten.

- Kontrollera att problem eller risker ej uppstår när rullstolens regleringsmöjligheter används.
- Syrgashållaren medför en förhöjd tipprisk, speciellt i tiltat läge. Var uppmärksam på detta.
- Använd alltid tippskydd.
- Syrgashållare bör ej användas i kombination med tillbehöret Droppställning.
- Max totalvikt för syrgashållare och syrgastub tillsammans är 6 kg.
- Följ de instruktioner tillverkaren av syrgas tuber ger, när det gäller hantering av denna.



Byt alltid ut skadade delar omedelbart. För övrig information se *Underhållsanvisning*, dok. nr. 96730.