




HD Balance är en svensk komfortrollstol med en genomtänkt design där både brukarens och vårdarens behov och krav sätts i centrum.

REGLAGE FÖR SITSTILT OCH RYGGVINKEL

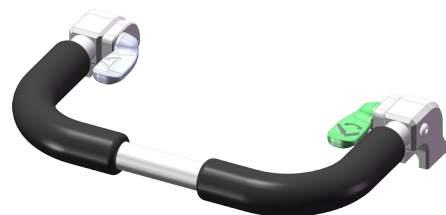

Placerade vid körbygeln så att greppet kan bibehållas. Med grönt reglage för sitstilt och nedtonat grått för ryggvinkel blir det lättare att välja rätt reglage.

GODA KÖR-EGENSKAPER

Lättmanövrerad tack vare en kort hjulbas.

LÅG TOTALVIKT

Väger under 31 kg, inklusive vårdarbroms, armstöd, benstöd, och dynor.

VÅRDAR-VÄNLIG

De vanligaste inställningarna är intuitiva och verktygslösa. Ergonomisk reglageplacering för ryggvinkel och tilt.

Precision och hållbarhet uppnås genom användning av material och komponenter av högsta kvalitet.

HD Balance har många konfigurationsmöjligheter för att möta unika behov hos varje unik individ.

Det breda tillbehörsprogrammet ger ytterligare anpassningsmöjligheter.




HD balance 24



HD balance 16


SKIVBROMSAR

HD Balance är utrustad med skivbromsar som är säkra och har en effektiv bromsverkan.

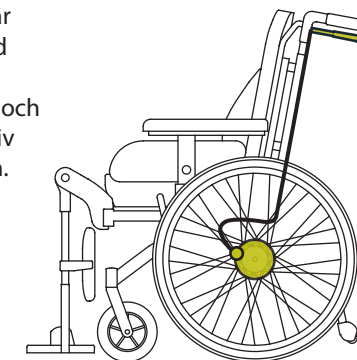

SKALOR OCH BRUKARKORT

Skalor finns för ryggvinkel, sitstilt, armstödhöjd, benstödsinkel och sittedjup. Används tillsammans med brukarkortet som hänger på rollstolen.

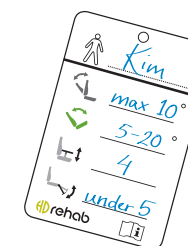

LÅNG LIVSLÄNGD


10 år vid normal användning.

ENKEL ATT MEKA MED




HÖG HÅLLBARHET


Mycket bra hållbarhet i standardutförande. Vid speciellt krävande fall kan ytterligare förstärkning erbjudas.

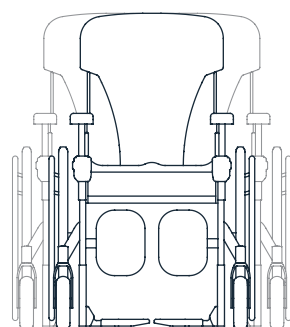


Sittbredd
38, 42, 46 eller 50 cm

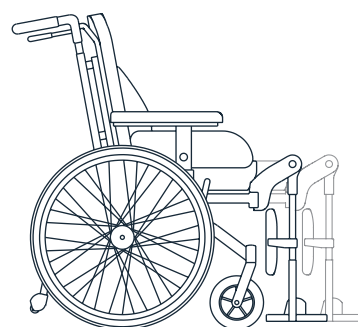

Sittedjup (2 chassi)
43-52 cm eller 48-57 cm

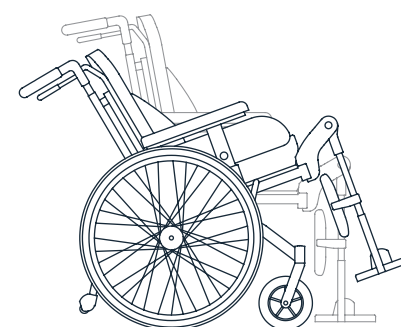


Sitstilt
0° - 20° eller -5° - 30°

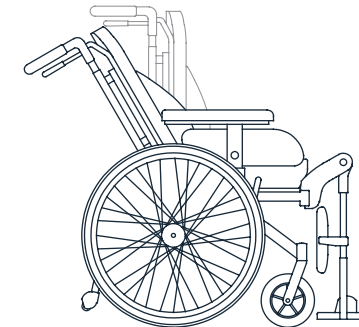

Ryggvinkel
90° - 120° eller 90° - 135°

FLEXI RYGGSYSTEM

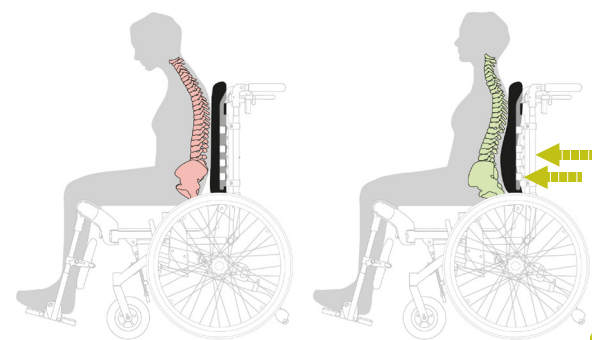

Ett ryggstöd som ger stora möjligheter att forma och ge stöd åt brukarens bäcken och rygg. Remmarna kan regleras för att tex ge plats åt en kyfos eller skålas för ett bättre sidostöd. Rätt inställt kan ryggstödet också bidra till förbättrad andning, sväljfunktion och tal.

BENSTÖD

Benstöden kan vinklas 90° -180° utan konflikt med länkhjulen.

Det är enkelt att ta av eller vinkla bort hela benstödsenheten.

Benstödet kan även tas av eller sättas dit i sidled bakom brukarens underben vilket underlättar om brukaren tex har kontrakturer.



FÖRSTÄRKT RULLSTOL

Ett ramförstärkt utförande kan väljas när rullstolen kommer att utsättas för stora krafter beroende på brukarens rörelsemönster eller beteende.

För att ytterligare skona rullstolens delar kan HD Balance även utrustas med en fjädrande rygg.

HD BALANCE CHASSI

Chassimodellerna håller lika hög kvalitet som våra övriga rullstolar. Chassit är stabilt, har goda köregenskaper och är enkelt för vårdaren att använda. Dessa egenskaper gör HD Balance Chassi till ett utmärkt val vid användning av formgjutna sitsar/ryggar. HD Balance Chassi finns med 24" drivhjul eller med 16" drivhjul.


24"

16"

Sittplattan fixeras med skruvar


Fast ryggvinkel 90°-105° eller 105°-120°

Förstärkt hjulram, sitsram och ryggram

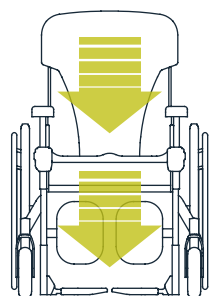


Kort brukare

Standard chassi, sänkt sittenhet, framflyttat ryggstöd och avkortade benstöd.

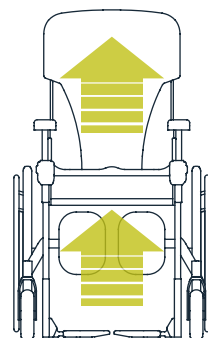


Lång brukare

Förlängt chassi, förhöjd sittenhet, hög rygg (+10 cm) och förlängda benstöd.

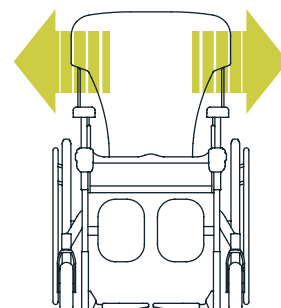

Bredare överkropp

Standard chassi, bredare ryggssystem +4 cm eller +8 cm, bredare armstöd.

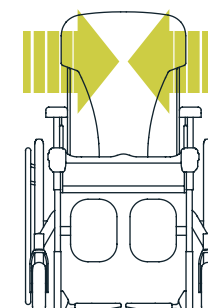

Smalare överkropp

Standard chassi, smalare ryggssystem -4 cm.

KONFIGURATIONSÖMÖJLIGHETER

Exempel på konfigurationsmöjligheter på HD Balance.
För ytterligare konfigurationsmöjligheter se hdrehab.se.

TILLBEHÖR

Ett urval av tillbehör för HD Balance.
För ytterligare tillbehör se hdrehab.se.


VINKELSTÄLLBAR
KÖRBYGEL



ELFUNKTIONER
TILT/RYGG



KLÄDSLAR

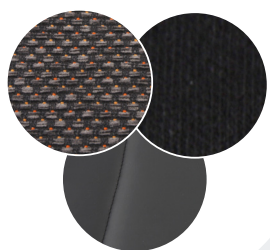

KILFORMAT
SIDOSTÖD




ARMSTÖD



FOTSTÖDSSIDA



FOTLÅDA

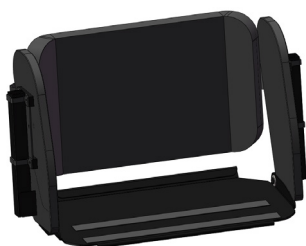

BENSTÖD FAST VINKEL



HUVUD /
NACKSTÖD



BRÖSTSELEFÄSTE



AXELSTÖD



ARMSTÖDSSARG



BÅLSTÖD



UTFYLLNADS-
KUDDAR



FOTSTÖDSPOLSTRING



BORD





HD balance 24

Brukarmanövrerad
komfortrullstol med
24" drivhjul



HD balance 16

Vårdarmanövrerad
komfortrullstol med
16" drivhjul

Sittbredd	38 / 42 / 46 / 50 cm
Sittdjup standard, med dyna	43 - 52 cm
Sittdjup förlängt, med dyna	48 - 57 cm
Sithöjd, golv till sittplatta	
modell 24	38 till 50 cm
modell 16	42 till 50 cm
Ryggstödshöjd sittplatta till överkant ryggstöd standard	55 - 60 cm
Ryggstödshöjd sittplatta till överkant ryggstöd förlängd	65 - 70 cm
Ryggvinkel standard	90 - 120°
Ryggvinkel utökad	90 - 135°

Sitsvinkel standard	0 - 20°
Sitsvinkel utökad	-5 - 30°
Benstödsinkel	90 - 180°
Totalbredd	modell 24 63 / 67 / 71 / 75 cm
	modell 16 62 / 66 / 70 / 74 cm
Totallängd med benstöd	98 cm
Totalhöjd utan huvudstöd	105 cm
Höjd ihopfälld	75 cm
Totalvikt inkl armstöd, benstöd, dynor, vårdarbroms	29,9 / 30,2 / 30,4 / 30,7 kg
Max brukarvikt	135 kg

Ytterligare mått finns på hdrehab.se



Made in Sweden

HD rehab

www.hdrehab.se · info@hdrehab.se · 08 - 767 04 80