


HD balance

Nästa generation komfortrollstolar!

HD Balance är en helt ny svensk komfortrollstol med en genomtänkt design där både brukarnas och vårdarnas behov och krav satts i centrum. Precision och hållbarhet är ledord som HD Balance ärvt av sin föregångare, HD 500. Bara material och komponenter av högsta kvalitet används vid tillverkningen på Lidingö.

Sitsbredder:	38, 42, 46, 50
Hjulstorlekar:	16" & 24"
Sitstill:	ca 0° - 20° (standard) ca -5° - 30° (utökad)
Ryggvinkling:	ca 90° - 120°
Max brukarvikt:	135 kg

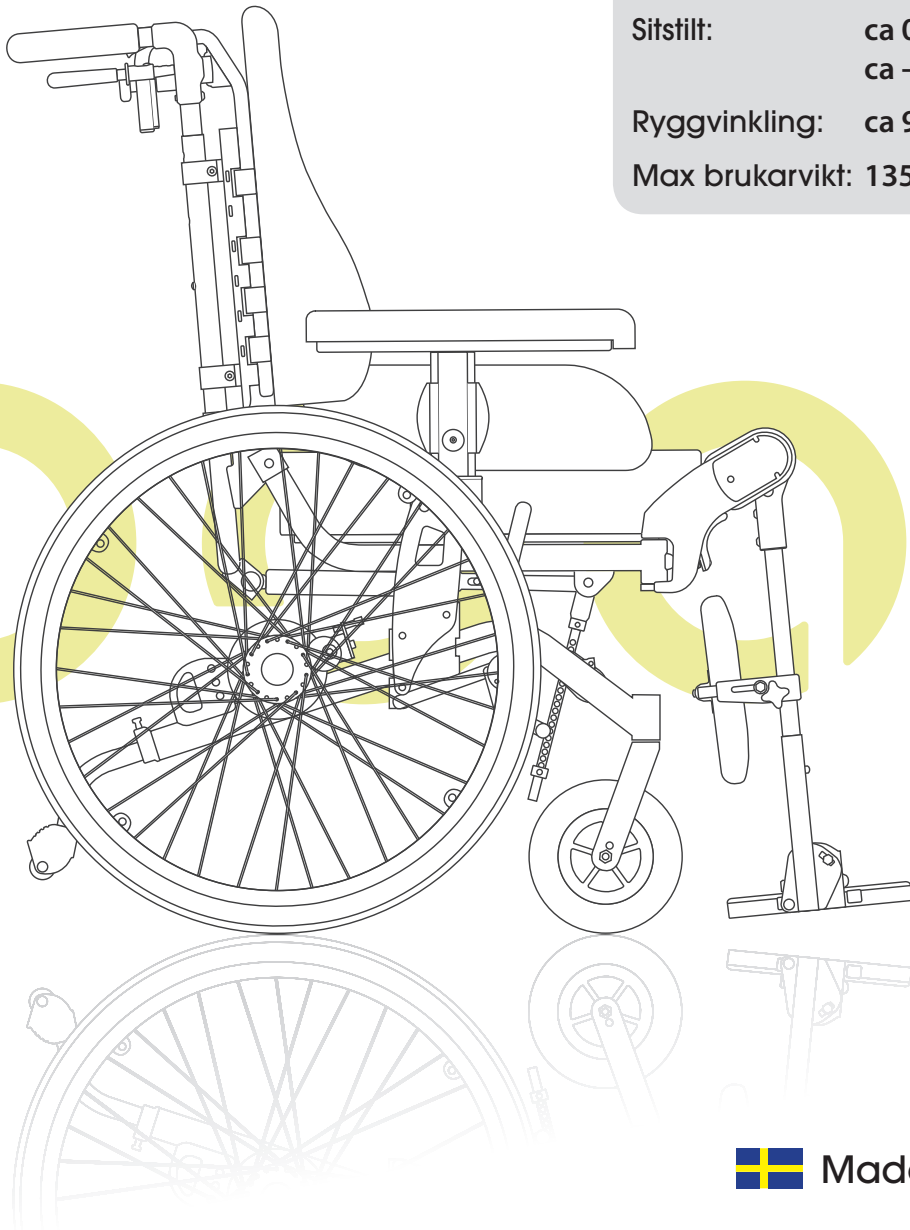

 Made in Sweden


Viktiga egenskaper:

► BRA KÖREGENSKAPER

Extremt kort avstånd mellan länkhjul & drivhjul ger mycket bra köregenskaper för både brukare & vårdare. Drivhjulen ligger dessutom helt i linje med länkhjulen vilket gör att stolen enkelt kan köras på smala ramper.

► SITSTILTENS VRIDPUNKT ÄR BELÄGEN NÄRA BRUKARENS TYNGDPUNKT


Ger en bättre kontroll av tiltningen eftersom det krävs mindre kraft för att tilta, speciellt värdefullt när det gäller tyngre brukare. Vridpunktens position ger även möjlighet till utökad tiltning i speciella fall.

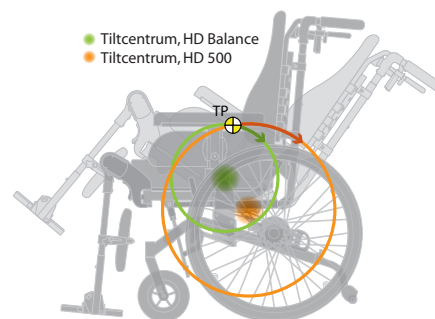

► HÖG PATIENTSÄKERHET

Skalor för olika inställningar

Den goda sittergonomin som förknippas med tidigare HD-rullstolar är kvar. Den har kryddats med ett antal skalor som underlättar för vårdare och anhöriga att säkerställa att brukaren sitter i rätt position. Kommunikationen mellan förskrivare och vårdare/brukare/anhörig förenklas avsevärt genom detta.

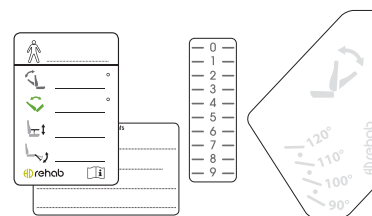


Reglageplacering

Tilt- och ryggvinklingsreglagen har placerats så att vårdaren kan bibehålla sitt grepp om körbygeln när dessa funktioner används. Det ger ökad kontroll över rörelsen!

► FLEXIRYGG SOM STANDARD

Flexiryggen är standard på HD Balance och går nu att få både i förlängt och breddat utförande!

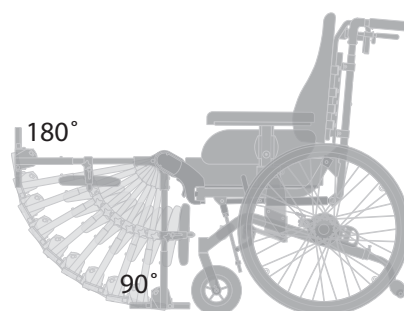


► BENSTÖD MED EXTREMT BRA VINKLINGSMÖJLIGHETER

Benstöden kan vinklas mellan 90 och 180 grader som standard, utan att länkhjulen behöver bytas ut. Det är också väldigt lätt att ta av eller vinkla bort hela benstödsenheten. Det finns även möjlighet att välja ett benstöd som inte är vinkelställbart.

► ROBUST OCH SMIDIGT ARMSTÖD

Armstödet sitter i en "fästpunkt" vilket gör det enkelt att ta av och sätta på plats. Inställningsmöjligheterna i djup och höjd är generösa. Armstödet har även en inbyggd monteringskena undertill där olika tillbehörsfästen kan monteras, t ex bordsfästen.

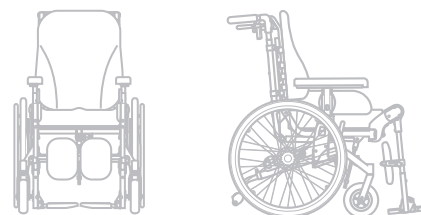

► ETT BRETT OCH FLEXIBELT TILLBEHÖRSPROGRAM

En rad olika tillbehör finns såsom alternativa ben- och vadstöd, bålstöd, axelstöd, bord mm.

► INTEGRERADE TRANSPORTFÄSTEN

► RULLSTOLEN HAR ETT RENT UNDERREDE OCH HÖG MARKFRIGÅNG

